

BENOIT SYSTEMES



POUSSEUR 2.1


NOTICE D'UTILISATION



← Suivez-nous!

WWW.BENOITSYSTEMES.COM

CE


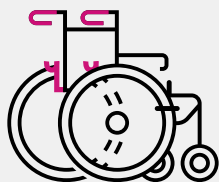


Votre fauteuil a été équipé de **profilés et de crochets** qui permettront l'installation très rapide de votre motorisation.

Des **supports** ont été installés sur les poignées du fauteuil pour la mise en place des poignées de commande.


1 METTEZ EN PLACE LA MOTORISATION

1. Actionnez les freins du fauteuil pour faciliter le montage.
2. Dirigez vers l'arrière les deux manettes d'embrayage (position neutre). Si besoin, tirez le bouton d'embrayage noir.
3. Posez le moteur sur les crochets à l'aide de la poignée supérieure en positionnant les axes gris sur les crochets gris.
4. Vérifiez que les axes soient bien en place dans les crochets.

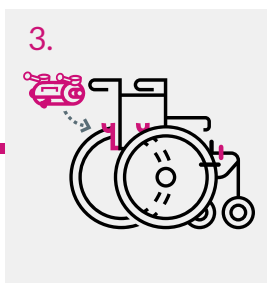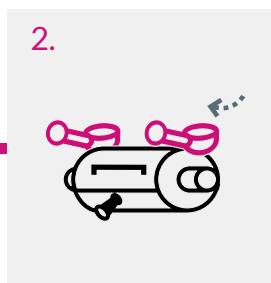

2 BLOQUEZ LES MANETTES


1. Tirez chaque poignée télescopique pour avoir plus de force.
2. Embrayez les deux manettes en commençant toujours par le côté droit.

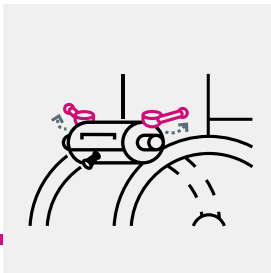

3 POSITIONNEZ LES POIGNÉES DE COMMANDE

Deux poignées sont fournies avec la motorisation :

Bouton marche
avant/arrière

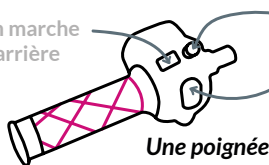

Une poignée tournante
pour conduire le fauteuil

Limiteur
de vitesse

Bouton
marche/arrêt




Une poignée fixe pour équilibrer
les bras de l'accompagnant

Les poignées se positionnent à droite ou à gauche sur les poignées arrière du fauteuil.


4 METTEZ EN PLACE LA BATTERIE

1. Prenez le rack batterie et posez le profilé supérieur sur les glissières.
2. Poussez le rack assez fermement jusqu'à entendre le bruit des connecteurs qui s'enclenchent.

1.

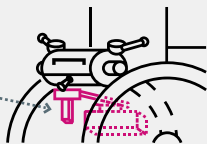


2.

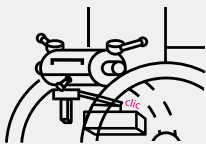


5 POSITIONNEZ L'ANTI-BASCULE

Introduisez l'anti-bascule de sécurité dans la poignée arrière de la motorisation (roulette dirigée vers le bas).

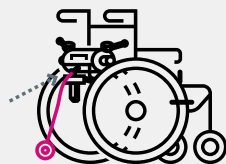

LE +

Débrayez la motorisation en un mouvement et retrouvez ainsi l'usage classique du fauteuil roulant

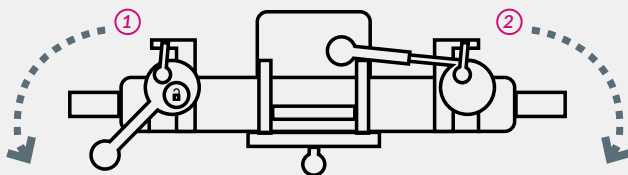

- ① Débrayez la poignée gauche et ramenez-la vers l'avant.
- ② Débrayez et ramenez la poignée droite contre le dossier.

CONSEILS D'UTILISATION

Dans les lieux confinés, 2 possibilités :

1. Débrayez la motorisation et utilisez le fauteuil en mode manuel.
2. Utilisez le limiteur de vitesse pour bloquer la motorisation à une vitesse très faible et conduisez le fauteuil à l'aide de la poignée tournante.

À l'approche d'un trottoir :




Ne pas s'arrêter devant la marche et ne pas essayer de soulever le fauteuil !
Approchez lentement du trottoir, basculez le fauteuil (les roues avant sur le trottoir) et continuez à avancer.

6 RETIREZ LA MOTORISATION

Actionnez les freins sur le fauteuil pour faciliter le démontage.


1. Laissez les poignées embrayées sur le fauteuil
2. Retirez l'anti-basculer et accrochez-le à l'emplacement prévu sur la batterie.
3. Déverrouillez le rack batterie à l'aide du verrouillage de rack et tirez-la vers l'arrière.
4. Retirez les 2 poignées de commande et rangez-les à l'emplacement prévu à l'arrière de la motorisation.
5. Mettez les manettes en position neutre (tirez sur le bouton noir).

Soulevez la motorisation à l'aide de la poignée supérieure. Les axes doivent sortir des crochets.

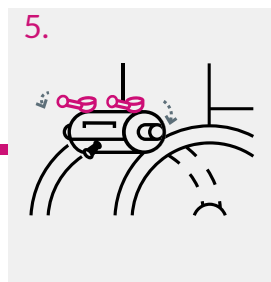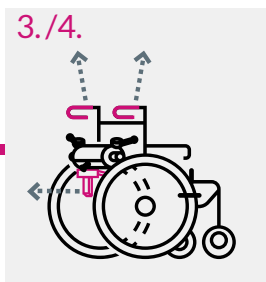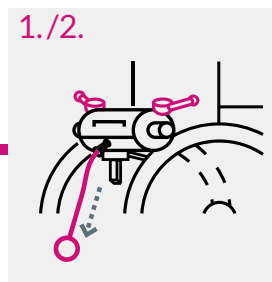

7 RECHARGEZ LA BATTERIE

Raccordez les 2 connecteurs rouges de la batterie et du chargeur ensemble puis branchez le chargeur sur le secteur.
Déconnectez une fois la charge complète.

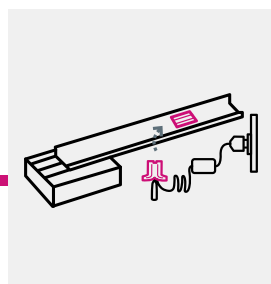

CARNET D'ENTRETIEN À CONSULTER

pour les consignes de
conduite, de sécurité
et d'entretien



📍 7 Rue du Pont, 21450 Billy Les Chanceaux FRANCE
☎ (+33) 3 80 96 51 25 | @ contact@benoitssystemes.com