

BENOIT SYSTEMES



LIGHT DRIVE 2.1



WWW.BENOITSYSTEMES.COM





LIGHT DRIVE 2.1

Le **LIGHT DRIVE 2.1** est une motorisation légère destinée à tous les utilisateurs occasionnels ou permanents de fauteuils roulants manuels.

Il est fabriqué sur mesure selon la largeur d'assise en France par BENOIT SYSTEMES depuis 1994. Ce système vous offre la possibilité de motoriser très facilement en quelques secondes votre fauteuil roulant.




INSTALLATION
EN MOINS
DE 15s




SE CONDUIT
AVEC UN
JOYSTICK



COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?

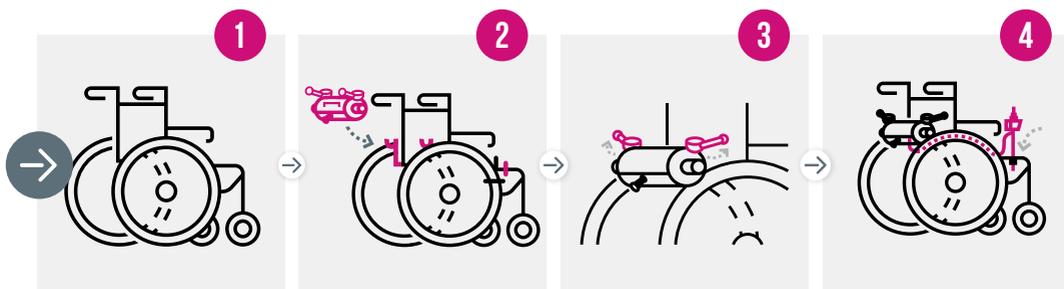

VOTRE FAUTEUIL ROULANT — POSE DE LA MOTORISATION — BLOCAGE DES MANETTES — POSE DU JOYSTICK

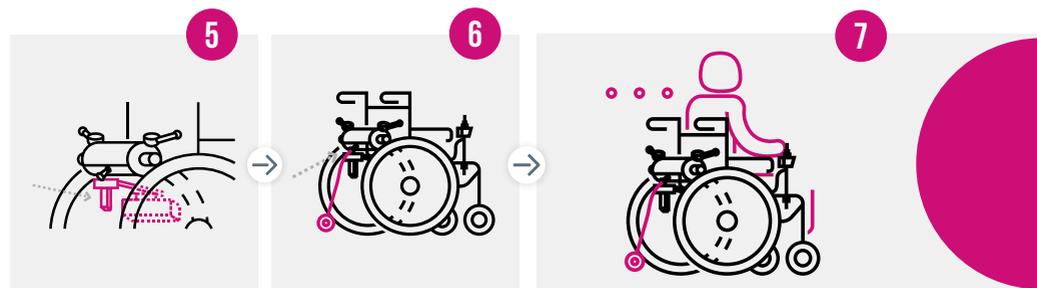

MISE EN PLACE DE LA BATTERIE — INSERTION DE L'ANTI-BASCULE — EN ROUTE !



Débrayez la motorisation en un mouvement et retrouvez ainsi l'usage classique du fauteuil roulant

Jean-Claude
Utilisateur depuis 2016 - atteint de
sclérose en plaques depuis 2003

“ Mon Light Drive me sert toute l'année à faire les courses avec mon épouse, à me balader dans les centres commerciaux et aux beaux jours à me promener dans les videgreniers et les marchés. Depuis que j'ai mon Light Drive je suis plus autonome, je n'ai plus besoin d'être accompagné tout le temps.



A photograph showing three people in an outdoor setting. In the foreground, a man and a woman are seated in motorized wheelchairs, facing away from the camera. The man is wearing a dark blue quilted jacket, and the woman is wearing a black leather jacket. They are positioned on a gravel path next to a blue metal gate. A woman in a tan coat stands behind the gate, looking towards them. The background features a stone wall and trees. A large, semi-transparent pink speech bubble is overlaid on the left side of the image, containing text.

LIGHT DRIVE 2.1,
Prêt pour de nouvelles
aventures ?

LES ATOUTS DU LIGHT DRIVE 2.1



LÉGER ET FACILEMENT TRANSPORTABLE



S'ADAPTE À TOUS LES FAUTEUILS*

**voir le guide de compatibilité*



MISE EN PLACE EN 15 SECONDES



INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



AUTONOMIE JUSQU'À 15 KM



TRANSPORTABLE EN AVION*



FABRIQUÉ EN FRANCE



AMOVIBLE



CHOIX DU COLORIS

* La batterie 11.4 Ah est compatible avec les règles IATA en vigueur.

Le Light Drive 2.1 est léger, facilement démontable et transportable



Un système d'embrayage ergonomique



Une rallonge de joystick



Un anti-bascule pour plus de sécurité



Large choix de couleurs

NOUVEAUTÉ EN 2022



Batterie avec indicateur de charge

LA GAMME DE COULEURS



CLASSIQUES

- NOIR
- BLANC
- BLEU
- ROUGE
- KAKI

MÉTALLIQUES

- BLEU NUIT
- GRIS
- ARGENT
- CUIVRÉ
- DORÉ

TENDANCES

- BLEU CLAIR
- ROSE
- VERT
- JAUNE
- ORANGE

LIGHT DRIVE MINI 2.1



Le Light Drive 2.1 pour les plus petits.

Le Light Drive Mini 2.1 est modulable et s'adaptera aux divers fauteuils (croissance de l'enfant, changement de type de fauteuil).

Le fauteuil ainsi équipé restera très facile à embarquer en voiture.

Grâce à lui l'enfant aura la possibilité de rouler aisément sur toutes sortes de terrains (pentes raides, herbe, graviers). La marche arrière l'aidera à franchir les obstacles les plus importants tels que petites marches ou trottoirs.



LIGHT DRIVE PLUS 2.1



Le Light Drive 2.1 s'adapte et devient Light Drive Plus 2.1.

Le Light Drive Plus 2.1 est conçu pour les utilisateurs de fauteuils roulants dont le poids est supérieur à 120 kg.

Equipé de 4 moteurs de 130 W il vous permettra de profiter des avantages des motorisations légères.

Il s'adapte sur tous les fauteuils pliants et grâce à la batterie Lithium-ion de 18 Ah, vous avez jusqu'à 20 km d'autonomie.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nos motorisations sont compatibles avec la plupart des fauteuils roulants manuels pliants ou fixes à partir de **32 cm d'assise et 40 cm entre les roues arrière.**

Consultez nous !

	Poids maximum de l'utilisateur	Poids maximum admissible du dispositif	Poids de la motorisation
Light Drive 2.1	120 kg	150 kg	8,8 kg
Light Drive Mini 2.1	120 kg	150 kg	8,8 kg
Light Drive Plus 2.1	240 kg	260 kg	16 kg

Vitesse maximale	10 km/h programmable
Moteur	2 moteurs de 130 W avec freins
Moteur Light Drive Plus 2.1	4 moteurs de 130 W avec freins
Hauteur d'obstacle max franchissable	6 cm avec et sans élan
Pente maximale de sécurité	6° (11%)
Garantie	24 mois pour la motorisation et la batterie



Fauteuils adaptables : un guide de compatibilité est disponible pour connaître les modèles de fauteuils roulants sur lesquels le Light Drive 2.1 peut être installé, dans le respect des exigences générales en matière de sécurité et de performance énoncées dans le Règlement Européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.



LA BATTERIE 11,4 AH EST COMPATIBLE AVEC LES RÈGLES IATA EN VIGUEUR POUR LES VOYAGES AÉRIENS

Modèle	Poids	Autonomie
– Batterie Lithium-ion	– 3,85 kg	– jusqu'à 15 km



D'autres options et informations sont disponibles sur notre site internet



PAR ICI





07/2022 - Réalisation - EclouJINK - Photos non contractuelles
Photos : Fabrice Dupoux

VOTRE REVENDEUR

DEMANDEZ VOTRE **ESSAI GRATUIT !**

📍 7 Rue du Pont,
21450 Billy-Lès-Chanceaux FRANCE
☎️ (+33) 3 80 96 54 65
@ export@benoitsystemes.com

CE Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. En sa qualité de fabricant, BENOIT SYSTEMES déclare que ce produit est un dispositif de classe I, conforme aux exigences de sécurité et de performance du Règlement européen 2017/745/CEE relatif aux dispositifs médicaux.