

# ACTI'TAB

L'accessoire indispensable pour votre fauteuil roulant

**NOUVEAU**



Augmentez votre  
autonomie et votre  
indépendance  
dans  
vos gestes  
quotidiens grâce à  
**ACTI'TAB**  
la tablette  
multi usages

ACTI'TAB démontée  
Facile à transporter



[WWW.BENOITSYSTEMES.COM](http://WWW.BENOITSYSTEMES.COM)

# POSITIONS DE LA TABLETTE ACTI'TAB

Un utilisateur de fauteuil roulant a besoin de ses deux mains pour mouvoir et diriger le fauteuil. Seuls les genoux et les cuisses, sont disponibles pour supporter les objets que l'on doit transporter ou utiliser, ce qui n'est ni pratique ni efficace.

**ACTI'TAB** pourra vous accompagner partout et, en quelques secondes seulement, se positionner sur les genoux pour vous aider dans l'activité de votre choix.

## ACTI'TAB en position de travail (Posée sur les genoux)



Mise en place et réglage de la hauteur

## ACTI'TAB repliée sur le côté



Après son utilisation, la tablette peut être repliée sur le côté, ce qui permet de l'avoir toujours à disposition

## ACTI'TAB en position inclinée



Pour lire et se divertir.  
Le plateau en ABS noir peut être posé sur la tablette, coté rebord unique inférieur

## « Personnalisez vous-même votre tablette »

Une ventouse à crochet pour transporter, par exemple, un sac de courses

Une pince à fixer sur la tablette avec son aimant ou avec une pastille velcro

Un sachet de 6 pastilles velcro velours et 6 pastilles velcro crochets pour fixer sur la tablette tout objet courant (ex. Tél. Portable, étui à lunette, etc.)

Un aimant rond d'une force de 2 kg pour maintenir, sur le couvercle chromé, feuilles, cartes de visite, etc. Cet aimant peut se stocker sur la cornière de l'articulation de la tablette afin qu'il soit toujours à disposition.

Un lot de 4 aimants rectangulaires autocollants pour positionner tout accessoire de votre choix sur le couvercle chromé

Un plateau en ABS thermoformé noir qui se place sur la tablette en plexiglas. Il possède deux faces :  
Une face multi rebords qui permet de poser et transporter des objets divers et une face avec rebord unique qui permet, lorsque la tablette est inclinée, de poser un livre sans que celui-ci ne glisse.  
**NOTA BENE** : le plateau n'est disponible dans l'immédiat que pour une tablette standard

Un tapis en silicone antiglisse qui permet aussi de supporter des objets chauds (< 230 C°, ex. casserole)

Un porte gobelet ou porte tasse original qui peut recevoir, tasse, mug, cannette, petite bouteille, verre, etc. et qui se fixe, grâce à ses 2 aimants incorporés, sur le couvercle chromé de la tablette.

## LES ATOUTS DE LA TABLETTE ACTI'TAB

- ✓ Mise en place instantanée
- ✓ Repliable et facile à transporter
- ✓ S'adapte à tous les fauteuils
- ✓ Réglable en hauteur et en inclinaison
- ✓ Escamotable et toujours accessible
- ✓ Discrète et sobre
- ✓ Même en place, la tablette permet de pouvoir s'installer à une table
- ✓ Nombreux accessoires fournis avec la tablette
- ✓ Garantie 1 an


**S'ADAPTE A TOUS LES FAUTEUILS ROULANTS MANUELS ET ELECTRIQUES**

# ACTI'TAB en détails ...

- **ACTI'TAB** est disponible en plusieurs tailles :

**COTE A :**

- Standard (40 cm)
- Enfant (31 cm)
- Large (44 cm)
- Possibilité de tablette sur mesure

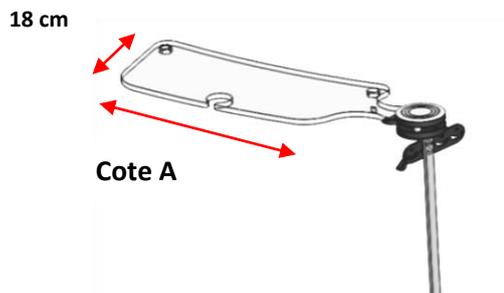

- **Matériaux utilisés pour L'ACTI'TAB :**

- Tablette : PMMA (plexiglas)
- Plateau (ou capot) ABS thermoformé
- Disques : Plastique injecté
- Entretoises : acier
- Articulation : acier
- Rallonge : acier
- Couvercle : acier chromé
- Equerre multi-positions : acier
- Visserie : acier



La glissière est installée de manière permanente par simple vissage sur le châssis du fauteuil

- **MATÉRIAUX UTILISÉS POUR LA GLISSIÈRE ET SON SUPPORT**

- Feuillard : acier
- Embase glissière : polyamide 30% fibre de verre
- Plaque glissière : acier
- Axe mobile : acier
- Visserie : acier

Vidéos explicatives disponibles sur la chaîne



- **RENFORT TABLETTE (option)**

Pour les personnes qui ont besoin d'un appui stable, réglable en hauteur, BENOIT SYSTEMES propose un renfort tablette (positionné à l'opposé de l'articulation, voir photo ci-dessous). Ce renfort permet de se servir de la tablette au même titre qu'une table et donc d'y prendre ses repas. Ce renfort optionnel fera l'objet d'une demande spécifique lors de la commande de votre tablette.

**Renfort tablette**



Tube équipé d'une bande velcro velours



Découvrez sur notre site :

Les motorisations légères et l'accessoire de relaxation « Kitcool »

[WWW.benoitsystemes.com](http://WWW.benoitsystemes.com)

7 Rue du Pont

21450 Billy les Chanceaux

Tél. 03 80 96 51 25

Fax 03 80 96 53 57

[contact@benoitsystemes.com](mailto:contact@benoitsystemes.com)

